

Îngrijirea Implantului


- Imediat după operație, aveți grijă să nu perturbați procesul de vindecare din zona implantării. Mâncați alimente moi timp de câteva săptămâni, cât timp rana se vindecă, și odihniți-vă.
- Păstrați integritatea implantului printr-o bună igienă orală. Spălați-vă pe dinți cu o periuță moale după ce vă treziți, în fiecare dimineață, și înainte de culcare, în fiecare seară. Dacă este posibil, spălați-vă pe dinți după fiecare masă.
- Evitați fumatul pentru că poate încetini procesul de vindecare și poate degrada calitatea osului.
- Întrebați medicul stomatolog cum puteți avea grijă corespunzător de implant și programați verificări anuale și de igienizare.

Informații de siguranță RMN

Testele non-clinice au demonstrat că PiezoImplantul REX are compatibilitate RM condiționată. Acest lucru indică faptul că poate fi scanat într-un sistem RM care întrunește următoarele condiții:

- Câmp magnetic static de 1.5 T sau 3 T
- Gradientul de câmp spațial maxim de 1700 gauss / cm
- Sistemul RM maxim raportat, rata medie de absorbție specifică a întregului corp (SAR) de 2 W/kg (Mod normal de funcționare).

În condițiile de scanare definite mai sus, se prognozează ca PiezoImplantul REX să producă o creștere maximă a temperaturii mai mică de 2,2 °C după 15 minute de scanare continuă. În testarea non-clinică, artefactul de imagine cauzat de dispozitiv se extinde la aproximativ 16,2 mm de la PiezoImplantul REX atunci când este scanat cu o secvență de impuls de ecou gradient și un sistem RMN 3.0 T.

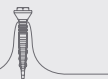

Reacții adverse posibile

Posibilele reacții adverse legate de utilizarea implanturilor dentare pot include: eșecul integrării; reducerea integrării; dehiscenta plăgii care necesită grefă osoasă; fractură a maxilarului; perforația următoarelor: sinusul maxilar, marginea inferioară a pereților osoși mandibulari, labial și lingual, canalul alveolar și gingia; abcese, fistule, supurație, inflamație, radiotransparență, durere persistentă, reducere a sensibilității, parestezie, hiperplazie, reducere osoasă excesivă care necesită intervenție chirurgicală, fractură de implant, infecții sistemice, leziuni ale nervilor sau alte afectări ale nervilor și leziuni vasculare sau hemoragii, care uneori pot fi grave, în special la pacienții supuși tratamentului cu anticoagulante și/sau antiagregante.

Vă rugăm să raportați imediat orice complicații precum fracturarea, mișcarea implantului sau infecția către medicul stomatolog și, de aseme

System PiezoImplant

PiezoImplantul pe care l-ați primit este o soluție inovatoare, de ultimă generație, concepută special pentru reconstrucția orală a creștelor osoase subțiri și reziduale. Când călătoriți, păstrați acest pașaport ca o evidență a tratamentului dumneavoastră.

Înainte de a primi orice tratament stomatologic suplimentar, inclusiv igienizare, arătați acest pașaport medicului. Vă recomandăm să alegeți un medic stomatolog care a beneficiat de pregătire specializată pentru a lucra cu PiezoImplant System. Dacă doriți ajutor pentru localizarea unui medic cu această calificare, vă rugăm să contactați sediul central Rex Implants pentru asistență.

PiezoImplant System este format din implanturi dentare din aliaj de titan (ASTM F136) care sunt plasate în os, șuruburi de acoperire pentru a proteja implantul în timpul vindecării și diverse alte componente ce permit dentistului să vă redea zâmbetul. Solicitați medicului stomatolog o copie a manualului chirurgical pentru implanturi Rex, pentru a înțelege modul în care aceste implanturi sunt plasate în cavitatea bucală.



Rex Implants
minimally invasive technology
PiezoImplant System

Rex Implants, Inc.
850 Michigan Avenue
Columbus OH
43215, USA

www.reximplants.com

PR-01 REV. 4



**Fișa Pacientului
Implant dentar**

Detalii tratament chirurgical Atașați eticheta din ambalajul implantului

etichetă bont	
număr dinte	dată

etichetă bont	
număr dinte	dată

etichetă bont	
număr dinte	dată

Detalii tratament protetic Atașați eticheta din ambalajul bontului protetic

etichetă bont	
număr dinte	dată

etichetă bont	
număr dinte	dată

etichetă bont	
număr dinte	dată

Detalii tratament protetic Atașați eticheta din ambalajul bontului protetic

etichetă bont	
număr dinte	dată

etichetă bont	
număr dinte	dată

etichetă bont	
număr dinte	dată

etichetă bont	
număr dinte	dată

etichetă bont	
număr dinte	dată

etichetă bont	
număr dinte	dată

Detalii pacient

Acest pașaport este utilizat pentru a înregistra informații importante despre tratamentul dvs., pentru dvs. și medicul dvs. stomatolog. Aduceți acest pașaport la vizitele ulterioare, pentru a facilita succesul pe termen lung al implanturilor dumneavoastră.

imię i nazwisko: _____

adres: _____

miasto/województwo: _____

kod pocztowy: _____

kraj: _____

telefon: _____

data inițială a operației: _____

informații medic chirurg	informatii medic chirurg
--------------------------	--------------------------